


Tohe  
LASER SYSTEM



# Radiofrecuencia

Despierta nuevamente la **capacidad**  
de tus tejidos **de renovarse**.

# ¿Que es la Radiofrecuencia?

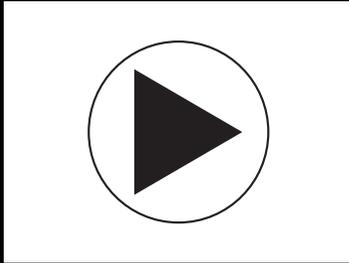

La radiofrecuencia es un **tratamiento indoloro y no invasivo** que consiste en el calentamiento gradual de un tejido tras el paso de una onda electromagnética.

Este calentamiento gradual, en el caso de la piel, provoca un efecto fisiológico llamado diatermia que consiste en la **activación fisiológica desde el interior del tejido** mediante tres acciones: aumento de la microcirculación, la dilatación de los vasos sanguíneos y el aumento de la temperatura a nivel dérmico con la consecuencia de producción de nuevo colágeno al aumentar el número de fibroblastos y una reestructuración del existente, con lo cual se consigue un resultado estético similar al **efecto "lifting"**.

La radiofrecuencia "despierta" nuevamente la capacidad de nuestros **tejidos** de **renovarse**.





Nuestra radiofrecuencia está compuesta por dos tipos de onda electromagnética una con una frecuencia de 2 Mhz para tratamientos corporales, y otra de 4 Mhz para tratamientos faciales y por tres cabezales resistivos, (bipolar, tripolar + LEDs de 640nm, y tetrapolar + LEDs 640nm).

Los LEDs son una luz roja a 640 nm que ayuda al metabolismo celular y **incrementa la producción de colágeno y elastina** para devolverle a la piel su elasticidad y reducir las cicatrices, líneas finas, arrugas y poros dilatados.



## ¿Cómo funciona?

La radiofrecuencia produce un **calentamiento gradual** sobre la piel, actuando principalmente sobre las fibras existentes de colágeno, reestructurándolas y produciéndose en la piel un efecto llamado colagenogénesis (**formación de nuevo colágeno**) al aumentar la producción del mismo por los fibroblastos, creando el efecto de contracción de la piel y, por lo tanto, reduciendo la flacidez.

Igualmente al aumentar la temperatura de dermis tiene un efecto sobre la circulación sanguínea con lo cual se consigue un **mayor aporte de oxígeno y nutrientes** y una mejor eliminación de los desechos.



## ¿Cómo se siente el tratamiento?

Al producirse el calentamiento de la piel de forma gradual la **sensación es placentera y relajante**. Este tratamiento es tanto para hombres como para mujeres que deseen **mejorar su aspecto sin cirugía**.

## ¿Qué puedo esperar de este tratamiento?

El resultado se puede apreciar en dos fases:

- **PRIMERA FASE:** Ocurre de manera inmediata al lograrse la contracción del colágeno existente.
- **SEGUNDA FASE:** Ocurre con el paso de las semanas, el efecto se irá acentuando con la producción de nuevo colágeno, lográndose el máximo efecto alrededor de los primeros tres meses, que es cuando se completa la formación de nuevo colágeno.



## Efectos visibles a nivel facial

Los efectos que conseguimos en zona facial son:

- **Firmeza y redefinición** del óvalo facial.
- Mejora del surco nasogeniano.
- Mejillas más turgentes y elevadas.
- Elevación de las cejas y remodelación del contorno de ojos.
- Mejora la **flacidez del cuello**.
- Difuminado de las **arrugas**.

Se produce una **oxigenación y desintoxicación de la piel** con activación del metabolismo de la misma.



## Tratamiento corporal

Los efectos que conseguimos en zona corporal son:

- Estimular la **producción de colágeno y elastina**, lo que dará más firmeza a la piel.
- **Aumentar la circulación sanguínea en la zona** de tejido graso, con lo que mejoraremos su metabolismo y la eliminación de desechos.
- Favorecer el drenaje linfático natural, lo que también ayuda a la **eliminación de toxinas**.

Dicho tratamiento se puede realizar en brazos, abdomen, glúteos y piernas. Por ello, es un tratamiento indicado para disminuir la flacidez y la celulitis en dichas zonas.

## Sesiones necesarias

El número de sesiones necesarias depende de la zona a tratar, en zona facial recomendamos unas seis sesiones y luego sesiones de recuerdo. En zona corporal recomendamos de ocho a diez sesiones y posteriormente de recuerdo.



## Especificaciones técnicas

### Modo de salida:

Cabezal grande	Frecuencia Multipolar Tetrapolar + leds de 640 nm
Cabezal mediano	Tripolar + leds de 640 nm
Cabezal pequeño	Bipolar
Rango de frecuencia	4 MHz Facial 2 MHz Corporal (2 Salidas independientes)
Energía regulable	0-40 j/s mediante saltos de 4 julios.
Modo de emisión	Continua
Visualizador:	Pantalla LCD 10,4 Pulgadas
Suministro eléctrico:	220V±10% 60HZ Max: 1,8 A – 400 W
Fusible	4 A
Color:	Blanco y Gris

### Medidas del equipo

Tamaño Equipo:	35,2 Cm Alto x 30,3 cm Ancho 28,8 c
Tamaño del cabezal grande	6,2 cm Ancho x 15,4 cm largo
Tamaño del cabezal mediano	3,9 cm Ancho x 14,7 cm largo
Tamaño de cabezal pequeño	2,5 cm Ancho x 13,6 cm largo

### Peso del equipo

Equipo:	7,5 kilos
Cabezal Grande:	456,8 gr
Cabezal Pequeño:	240.0 gr
Cabezal Mediano:	353,4 gr
Pedal:	167,6 gr
Cable de alimentación:	400,4 gr

### Condiciones de funcionamiento

Temperatura	5~30°C
Relativa humedad	≤80%
Barométrico	860~1060hPa



Tahe

## PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA TRATAMIENTOS DE RADIOFRECUENCIA

INTENSE es una línea para la prevención y la corrección del envejecimiento cutáneo. Sus componentes contienen principios activos, como los Proteoglicanos, Vitamina C y Ácido Hialurónico. Son la combinación perfecta entre dermatología y estética, entre ciencia y belleza.

# INTENSE

CON ÁCIDO HIALURÓNICO Y COLÁGENO



## Tratamientos cosméticos recomendados radiofrecuencia:

Primero hacemos un diagnostico de la piel del paciente:

- Si la piel es seca aplicamos media ampolla de vitamina C para hacer una leve exfoliación y posteriormente aplicamos aceite reparador.
- Si la piel mixta o grasa aplicamos media ampolla de vitamina C solamente.

Posteriormente haremos sesión de radiofrecuencia aplicando una pipeta de Ácido Hialurónico al gel conductor.

Tras finalizar la sesión aplicamos Ácido Ferúlico 4 gotas después del contorno de ojos y posteriormente la crema. Masajeando hasta su completa absorción.

### RECOMENDACIONES MANTENIMIENTO EN CASA:

#### MAÑANA

- Todo tipo de pieles: aplicamos contorno de ojos a continuación poner 4 gotas de Ácido Ferúlico por su efecto foto-protector, antioxidante... lo podemos aplicar directamente en la piel masajeando, y por ultimo la crema.

#### NOCHE

- Piel seca: aplicar vitamina C y posteriormente aceite reparador sobre la piel limpia.
- Piel mixta o grasa: 10-15 días de vitamina C por la noche sobre piel limpia.

# INTENSE

CON ÁCIDO HIALURÓNICO Y COLÁGENO

Tahe



## ÁCIDO FERÚLICO AL 0,6%

30 ml

CON VITAMINA C + E BIFÁSICO

Potente cuidado antioxidante de triple acción y origen natural para proteger y prevenir el envejecimiento prematuro de la piel. Su poderosa combinación de antioxidantes a base de Ácido Ferúlico, Vitamina C y E contribuye y potencia la fotoprotección de la piel frente a la radiación solar UVA y UVB al incrementar sus defensas, y neutraliza y combate los daños causados por agentes ambientales externos responsables del envejecimiento prematuro de la piel, como la contaminación.

# INTENSE

CON ÁCIDO HIALURÓNICO Y COLÁGENO

Tahe



50 ml

## CREMA HIDRATANTE CON ÁCIDO HIALURÓNICO Y COLÁGENO

Fórmula profundamente hidratante y nutriente, innovadora, de textura ligera y aterciopelada, inspirada en la genética de la piel. La tecnología Intense ayuda a los pliegues de la piel a potenciar sus funciones naturales de resistencia al paso del tiempo, reactivando las propiedades innatas de la piel de rejuvenecimiento, firmeza y turgencia.

# INTENSE

CON ÁCIDO HIALURÓNICO Y COLÁGENO

Tahe



30 ml

## CONTORNO DE OJOS

CON ÁCIDO HIALURÓNICO Y COLÁGENO

Fórmula de textura ligera y aterciopelada que ayuda a reducir los signos del envejecimiento en el contorno de los ojos. Preserva la juventud en la mirada, regenerando y nutriendo en profundidad. Uso: Aplicar delicadamente sobre el contorno del ojo, mañana y noche, mediante ligeros golpecitos del interior hacia el exterior del rostro con el dedo anular. Terminar con un movimiento alisador.

# INTENSE

CON ÁCIDO HIALURÓNICO Y COLÁGENO

Tahe



30 ml

## CONCENTRADO de ÁCIDO HIALURÓNICO

Avanzada combinación de anti-oxidantes e hidratantes: Proteoglicanos, Vitamina C y Ácido Hialurónico (Potente hidratante, anti-arrugas y regenerador de la piel. Promueve la renovación celular y regenera en profundidad, reparando los tejidos dañados). Modo de uso: Aplicar de día o de noche, de 5 a 8 gotas por cara, cuello y escote, antes de cualquier otro tratamiento facial.

# INTENSE

CON ÁCIDO HIALURÓNICO Y COLÁGENO

Tahe



## SERUM ANTIENVEJECIMIENTO

50 ml

CON ÁCIDO HIALURÓNICO Y COLÁGENO

Nueva generación de tratamientos de alta eficacia. Piel inmediatamente iluminada, sedosa y uniforme. Concentración extraordinaria de principios activos, por lo que unas gotas son suficientes para transformar el tacto y luz de la piel. Uso: Aplicar diariamente de día o noche con la piel desmaquillada, limpia, antes de la crema hidratante.

# INTENSE

CON ÁCIDO HIALURÓNICO Y COLÁGENO

Tahe



## ACEITE REPARADOR FACIAL

30 ml

CON ÁCIDO HIALURÓNICO Y COLÁGENO

Reduce espectacularmente los signos visibles del envejecimiento proporcionando a la piel un alto nivel de hidratación y una profunda reparación de los tejidos dañados por el paso del tiempo. Uso. Utilizar diariamente por la noche que es el momento que la piel dedica a su reparación natural. Ayuda a la piel a conseguir una reparación natural óptima.

# INTENSE

CON ÁCIDO HIALURÓNICO Y COLÁGENO

Tahe



5x2 ml

## SUERO LIFTING CON VITAMINA C PURA

CON ÁCIDO HIALURÓNICO Y COLÁGENO

Verdadero escudo frente al daño ambiental, de acción prolongada. Protege la piel del envejecimiento y contaminación gracias a la alta concentración en su fórmula de Vitamina C pura, Ácido Hialurónico y Colágeno. Agitar antes de usar.

# INTENSE

CON ÁCIDO HIALURÓNICO Y COLÁGENO

Tahe



## AGUA MICELAR EN ACEITE

300 ml

CON ÁCIDO HIALURÓNICO Y COLÁGENO

Elimina de forma suave pero profunda todos los restos de maquillaje e impurezas del rostro y ojos, dejando la piel confortable e intensamente hidratada. Sin acabado graso ni pegajoso. Uso. Agitar antes de usar. Utilizar empapando un algodón con cantidad suficiente y frotar de forma suave por todo el rostro.



## **GEL CONDUCTOR RADIOFRECUENCIA**

250 ml

CON EXTRACTO DE ÁRNICA MONTANA

Gel conductor indispensable para ser utilizado en sinergia en tratamientos para diatermia de contacto con dispositivos médico-estéticos. Especialmente formulado para potenciar la conducción, lo que favorece la transferencia energética por contacto capacitativo y/o resistivo en la zona tratada.

Mejora los efectos del tratamiento gracias a su contenido en Árnica Montana. Ésta contiene lactonas sesquiterpénicas y flavonoides que le confieren actividad antiinflamatoria.

# Resultados en pocas sesiones

1ª Sesión



2ª Sesión



The logo for Tahe LASER SYSTEM features the word "Tahe" in a stylized, white, sans-serif font. The letter "T" is unique, with a horizontal bar that extends to the left and then curves upwards. Below "Tahe", the words "LASER SYSTEM" are written in a clean, white, all-caps sans-serif font. A thin white horizontal line runs through the middle of the text. On the left side of this line, there is a small, multi-pointed starburst graphic. A thin white vertical line extends downwards from the starburst, and a thin white horizontal line extends to the left from the starburst, forming an L-shape.

Tahe  
LASER SYSTEM

[www.tahe.es](http://www.tahe.es)