



Tahe
LASER SYSTEM

LÁSER DIODO

con **Sistema F-SHR** de última generación y **Power Shoot**

IPL

con **Sistema SHR** de última generación y **Power Shoot**

IPL Y LÁSER DIODO

con **Sistema SHR** de última generación y **Power Shoot**

Productos específicos

Además, el Sistema RenTahe cuenta con una completa línea de productos específicos que potencian y complementan los tratamientos.



IPL Y LÁSER DIODO

con **Sistema SHR** de última generación y **Power Shoot**

Productos específicos



GEL PRE-DEPILACIÓN. 250 ml
Gel relajante, efecto frío.

Modo de uso: Aplicar cantidad suficiente sobre la espátula y extender sobre la superficie de la piel, antes de comenzar el tratamiento de IPL.

IPL Y LÁSER DIODO

con **Sistema SHR** de última generación y **Power Shoot**

Productos específicos



CREMA REGENERADORA de la piel de zonas amplias.
125 ml

Su fórmula contiene Alantoína, Glicerina, Bisabolol y Vitaminas que aceleran la renovación y revitalización de la piel dañada por los tratamientos dermocosméticos. Reduce la sensación de quemazón, enrojecimiento y otras molestias cutáneas, aportando una agradable sensación de confort de manera inmediata.

Modo de uso: Aplicar cantidad suficiente después del acto de la depilación en la zona afectada. Masajear suavemente hasta su completa absorción. Repetir la aplicación cuantas veces sea necesario.

IPL Y LÁSER DIODO

con **Sistema SHR** de última generación y **Power Shoot**

Productos específicos



CREMA REGENERADORA FACIAL FPS. Protección Media. 50 ml

Crema reparadora facial de día, de textura ligera no grasa. Hidratante y regeneradora con factor de protección media. Formulada con Alantoina, manteca de Karité, Bisabolol, Aloe y Vitaminas con propiedades antioxidantes y estimuladoras de la producción de células nuevas.

Modo de uso: Aplicar cantidad suficiente después del acto de la depilación en la zona afectada. Masajear suavemente hasta su completa absorción. Repetir la aplicación cuantas veces sea necesario.

IPL Y LÁSER DIODO

con **Sistema SHR** de última generación y **Power Shoot**

Productos específicos



ESPUMA POST-DEPIL CORPORAL FPS.30 Protección Alta. 300 ml

Espuma super-hidratante, inhibidora y retardadora del crecimiento folicular. De efecto calmante y anti-inflamatorio fuerte, es ideal para su aplicación después de la depilación química (depilatorios) y física (rasuración, cera fría o caliente o extracción mecánica).

Modo de uso: Aplicar cantidad suficiente después del acto de la depilación en la zona afectada. Masajear suavemente hasta su completa absorción. Repetir la aplicación cuantas veces sea necesario.

IPL Y LÁSER DIODO

con **Sistema SHR** de última generación y **Power Shoot**

Productos específicos



CREMA FACIAL SUPER-HIDRATANTE fps. 50+ Muy Alta. 50 ml

Crema facial super-hidratante inhibidora y debilitadora del crecimiento del vello. Contiene Bisabolol de efecto calmante y anti-inflamatorio. Ideal para después de la fotodepilación. Para óptimos resultados, utilizar diariamente la crema al menos durante un mes después de la depilación.

Modo de uso: Aplicar cantidad suficiente después del acto de la depilación en la zona afectada. Masajear suavemente hasta su completa absorción. Repetir la aplicación cuantas veces sea necesario.

IPL Y LÁSER DIODO

con **Sistema SHR** de última generación y **Power Shoot**

Productos específicos



CREMA FACIAL SUPER-HIDRATANTE CON COLOR

fps. 50+ Muy Alta. 50 ml

super-hidratante y reafirmante, que suaviza las manchas de la piel e inhibe y retarda la aparición del vello. Contiene Bisabolol de efecto calmante y anti-inflamatorio. Ideal para después de la fotodepilación. Para óptimos resultados, utilizar diariamente la crema al menos durante un mes después de la depilación. Fps. 50+ (protección Muy Alta).

Modo de uso: Aplicar cantidad suficiente después del acto de la depilación en la zona afectada. Masajear suavemente hasta su completa absorción. Repetir la aplicación cuantas veces sea necesario.

IPL Y LÁSER DIODO

con **Sistema SHR** de última generación y **Power Shoot**



La máquina IPL - Ficha técnica

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO

Fuente de luz:	2 Lámparas de xenón IPL Procedentes de UK.
Pantalla:	LCD de color natural de 10,4 pulgadas.
Longitud de onda del filtro:	Doble filtro de Zafiro 640nm --- 1200nm.
Tamaño del Spot (mm.):	20mm x 60mm - 12cm.
Frecuencia de repetición IPL:	Menor a 1Hz. y hasta 6 impulsos en un mismo pulso, ajustable por el usuario.
Frecuencia de repetición SHR:	Hasta 12Hz.
Ancho de Pulso IPS y SHR:	Desde 1ms. hasta 10ms.
Retardo entre impulsos:	De 0ms. a 100ms.
Potencia IPL:	2000W.
Densidad energética:	4,74-36,6 J/cm ²
Refrigeración:	Sistema de enfriamiento de circulación de agua interna con dos radiadores de Cobre de alto rendimiento; semiconductores para el cristal (Presión máxima de agua: 0,3 MPa); Incluye filtro desionizador y filtro de partículas.
Temperatura de refrigeración en cabezal:	Inferiores a -20°C.
Temperatura ambiente:	5°C - 40°C.
Humedad relativa:	≤80%
Presión atmosférica:	860 hPa - 1090 hPa.
Corriente eléctrica:	220V ~ 50/60Hz.
Potencial nominal:	2200W.
Potencia máxima:	3500W.
Potencia del Magneto térmico:	16 A curva D.
Dimensiones (longitud*ancho*altura):	Sistema vertical de 4 ruedas, 600*450*1040mm.
Peso:	54Kg.


IPL Y LÁSER DIODO

con Sistema SHR de última generación y Power Shoot

Los sistemas más avanzados

SHR sin dolor

SHR significa Super Hair Removal, este sistema nos permite un calentamiento gradual del folículo piloso por lo cual la sensación de dolor es nula y al mismo tiempo minimizamos los riesgos de efectos secundarios. Otra de sus ventajas es la posibilidad de depilar fototipos de piel más altos e incluso pieles bronceadas. Nuestro sistema SHR también denominado HFI (*High Frequency impulse*), es un sistema SHR mejorado, el cual llega hasta 12 disparos por segundo, con mayor eficiencia que los sistemas convencionales, al tener mayor potencia y poder generar ondas cuadradas y no picos como generan los demás sistemas SHR.

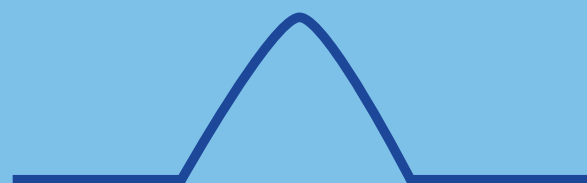

onda emitida por otros equipos de menor potencia



onda cuadrada

IPL Y LÁSER DIODO

con **Sistema SHR** de última generación y **Power Shoot**

Los sistemas más avanzados

Pulse Intense

Nuestro equipo incorpora un cabezal de gran tamaño con dos lámparas lo que nos permite repartir la energía de una manera más efectiva y minimizar el tiempo de los tratamientos.

Al incorporar dos lámparas la densidad de fluencia es mayor, teniendo en el spot mayor densidad de energía por cm^2 nos aseguramos que la energía llega a todos los folículos de la piel, aumentando así la efectividad de los tratamientos.

IPL Y LÁSER DIODO

con **Sistema SHR** de última generación y **Power Shoot**

Los sistemas más avanzados

Power Shoot

Este sistema nos permite concentrar la energía en un solo impulso para tratar los casos más rebeldes y también para finalizar tratamientos con ese vello fino que otros sistemas como el diodo o Alejandrita no consiguen eliminar.

Con esta gama de tratamientos en un solo equipo conseguimos eliminar el vello grueso sin dolor y llegar a eliminar el vello fino donde otros equipos IPL u otros sistemas de depilación no consiguen llegar.



“la fuerza de la experiencia”
